

# ປຶ້ມຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນຄວາມຮ້ອນດ້ວຍໄຟຟ້າ

ຮຸ່ນTDM64-001



## ຄຳແນະນຳກ່ອນໃຊ້ງານ

- ກະລຸນາອ່ານຄູ່ມືໃຫ້ລະອຽດກ່ອນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ
- ກວດກາຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ແລະສາຍໄຟຂອງແຜ່ນຄວາມຮ້ອນ. ຖ້າພົບເຫັນມີຄວາມເປັນເພັດຫ້າມເອົາໄປໃຊ້ງານເດັດຂາດ.
- ຢ່າພັບ / ມ້ວນແຜ່ນຄວາມຮ້ອນແລະສາຍໄຟໃນຂະນະທີ່ ນຳ ໃຊ້ຢູ່.

## ວິທີໃຊ້

1. ເປີດເຜີຍແຜ່ນຄວາມຮ້ອນ. ຢ່າພັບຫລືມ້ວນໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ຢູ່. ຈາກນັ້ນສຽບປັກສຽບໄຟໃຫ້ ແໜ້ນ ເຂົ້າໄປໃນຊັອກເກັດ.
2. ກົດປຸ່ມເປີດ ON / OFF ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ.
3. ເລືອກເວລາການ ນຳ ໃຊ້, ກົດປຸ່ມ (Timer) ເລືອກລະດັບຄວາມຮ້ອນ, ກົດປຸ່ມ(Level)
4. ວາງແຜ່ນເຮັດຄວາມຮ້ອນຕິດຕໍ່ກັບສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ. ພື້ນທີ່ທີ່ຕ້ອງການສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມອົບອຸ່ນໂດຍຜ່ານເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຫຼືວາງໄວ້ພາຍໃຕ້ຜ້າເຊັດໂຕ. ເພື່ອປົກປ້ອງຜິວຈາກການເຮັດໃຫ້ຮ້ອນເກີນໄປ.
5. ເຄື່ອງຈະປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອເວລາທີ່ກຳນົດ ໝົດ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປິດກ່ອນ, ທ່ານສາມາດກົດປຸ່ມ (ON / OFF) ຫັນທີ. ແລະຖອດປັກອອກທຸກຄັ້ງເມື່ອບໍ່ໃຊ້ ລໍຖ້າຈົນກ່ວາແຜ່ນຄວາມຮ້ອນໄດ້ເຢັນລົງແລ້ວເກັບມັນໄວ້.


## ການເກັບຮັກສາ

1. ພັບໃສ່ກ່ອງຫຼືເກັບໄວ້ໃນຮົ່ມ. (ອີງຕາມພັບເດີມ)
2. ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນແຫ້ງໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ (25-40°C) ບໍ່ຄວນສຳຜັດກັບແສງແດດໂດຍກົງ.



## ວິທີການເຮັດຄວາມສະອາດ

1. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ແຜ່ນຮອງຄວາມຮ້ອນປຽກ. ຖ້າແຜ່ນຮອງຄວາມຮ້ອນປຽກຕ້ອງພຶດໃຫ້ມັນແຫ້ງໃນຮົ່ມກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ງານອີກ.
2. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດແຜ່ນປົກດ້ານນອກເທົ່ານັ້ນ ແລະຄວນລ້າງດ້ວຍມື (ຢ່າລ້າງໃນເຄື່ອງຊັກຜ້າ) ຢ່າຕູ້ຫລືເອົາມືຂະຍິຢ່າງແຮງ.

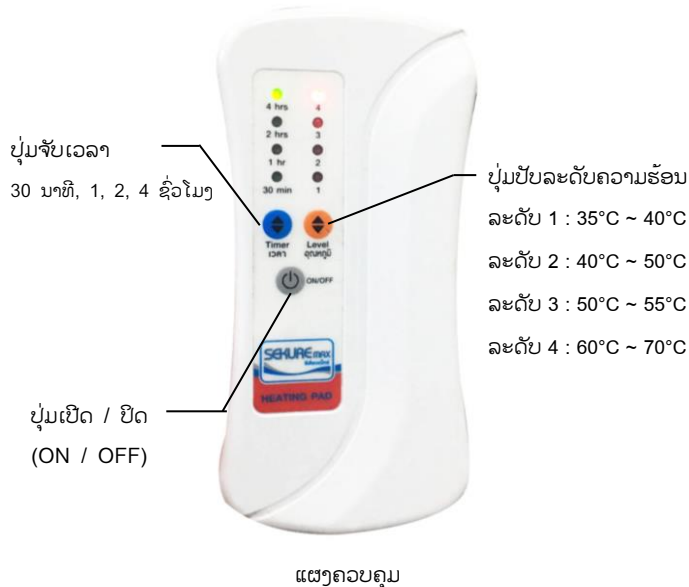

## ຄຳເຕືອນ ແລະ ຄຳແນະນຳ

- ຫ້າມໃຊ້ແຜ່ນຮອງຄວາມຮ້ອນໃນຂະນະທີ່ພັບຢູ່.
- ຫ້າມໃຊ້ແຜ່ນຮອງຄວາມຮ້ອນໃສ່ກັບເດັກນ້ອຍຕັ້ງແຕ່ເກີດຈົນເຖິງ 3 ປີ.
- ຫ້າມໃຊ້ເຂັ້ມຫລືວັດຖຸແຫຼມເພື່ອເຈາະແຜ່ນຄວາມຮ້ອນ.
- ຖ້າສິນຄ້າເປັນເພັດຫລືຂາດ ຫ້າມຊ້ອມແປງດ້ວຍຕົນເອງ, ການສ້ອມແປງຕ້ອງດຳເນີນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ.

- ບໍ່ຄວນໃຊ້ກັບຜິວທີ່ເປືອຍເປົ່າ. (ຄວນຫາຜ້າ ມາຮອງ1 ຊັ້ນກ່ອນໃຊ້)
- ຫ້າມໃຊ້ແຜ່ນຮອງຄວາມຮ້ອນໃສ່ຄົນທີ່ ໝົດ ສະຕິຫຼືໃຊ້ໃນຂະນະທີ່ນອນລັບຢູ່
- ຫ້າມໃຊ້ຄວາມຮ້ອນສູງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍດຽວກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນ.
- ຫ້າມໃຊ້ແຜ່ນຮອງຄວາມຮ້ອນໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມ. (ຄວນຕາກໃຫ້ແຫ້ງໃນຮົ່ມກ່ອນ)
- ຫ້າມຢ່າເອົາອອກຫລືດັດແປງແຜ່ນຄວາມຮ້ອນຢ່າງເດັດຂາດ.
- ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແຜງຄວບຄຸມຫລືສາຍໄຟຟ້າວາງຢູ່ໃຕ້ແຜ່ນຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້.
- ຄວນກຳນົດໄລຍະເວລາຂອງການນຳໃຊ້
- ຄວນໃຊ້ ແຜ່ນຮອງຄວາມຮ້ອນກັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະຄົນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໄດ້ເທົ່ານັ້ນ.

## ຂໍ້ຄວນລະວັງ

- ຄວນເກັບຮັກສາສາຍໄຟໃຫ້ຫ່າງຈາກຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.
- ຄວນໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ແຫ້ງເທົ່ານັ້ນ. (ຢ່າໃຊ້ໃນຫ້ອງນ້ຳຫລືໃນບ່ອນທີ່ປຽກຊຸ່ມ)
- ຫ້າມໃຊ້ແຜ່ນຮອງຄວາມຮ້ອນສ່ວນບໍລິເວນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ບາດແຜຫລືອັກເສບ.
- ຫ້າມແຕະແຜ່ນຮອງຄວາມຮ້ອນຖ້າມັນຕິກຢູ່ໄປໃນນ້ຳ. ຄວນຖອດປັກອອກຈາກເຕົາຫັນທີ.
- ບໍ່ຄວນໃຊ້ແຜ່ນຮອງຄວາມຮ້ອນກັບເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 3 ປີ. ເນື່ອງຈາກວ່າເດັກນ້ອຍແມ່ນບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮ້ອນສູງເກີນໄປ

ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ	220 ໂວນ
ກຳລັງໄຟຟ້າ	60 ວັດເຕີ
ຄວາມຖີ່ຂອງໄຟຟ້າ	50 ເຮີດ
ຂະໜາດ	30 x 45 cm.
ນ້ຳໜັກສິນຄ້າ	1.7kg. (ໂດຍປະມານ)

ນຳເຂົ້າແລະຈຳໜ່າຍໂດຍ : ບໍລິສັດ ສາຄອນເທສດີງ ຈຳກັດ  
 ທີ່ຢູ່: ບ້ານຕານມີໄຊ ຮ່ອມ1 ເມືອງໄຊທານີ  
 ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  
 ເບີໂທ 021771722 02091789035



ປຶ້ມຄູ່ມືການ

# ປຶ້ມຄູ່ມືການໃຊ້ແຜ່ນຄວາມຮ້ອນດ້ວຍໄຟຟ້າ ຮຸ່ນTDM64-001

1. ເປີດເຜີຍແຜ່ນຄວາມຮ້ອນ. ຢ່າພັບຫລືມ້ວນໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ຢູ່.  
ຈາກນັ້ນສຽບປັກສຽບໄຟໃຫ້ ແໜ້ນ ເຂົ້າໄປໃນຊັອກເກັດ.



2. ກົດປຸ່ມເປີດ ON / OFF ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ.



3. ເລືອກເວລາການ ນຳ ໃຊ້, ກົດປຸ່ມ (Timer)  
ເລືອກລະດັບຄວາມຮ້ອນ, ກົດປຸ່ມ(Level)



4. ວາງແຜ່ນເຮັດຄວາມຮ້ອນຕິດຕໍ່ກັບສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ.

ພື້ນທີ່ທີ່ຕ້ອງການສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມອົບອຸ່ນໂດຍຜ່ານເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ມີຫຼັງວາງໄວ້  
ພາຍໃຕ້ຜ້າເຊັດໂຕ. ເພື່ອປົກປ້ອງຜິວຈາກການເຮັດໃຫ້ຮ້ອນເກີນໄປ.

5. ເຄື່ອງຈະປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອເວລາທີ່ກຳນົດ ໝົດ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປິດກ່ອນ,ທ່ານສາມາດກົດປຸ່ມ (ON/OFF) ທັນທີ.  
ແລະຖອດປັກອອກທຸກຄັ້ງເມື່ອບໍ່ໃຊ້ລໍຖ້າຈົນກວ່າແຜ່ນຄວາມຮ້ອນໄດ້  
ເຢັນລົງແລ້ວເກັບມັນໄວ້.



ກ້ອນຫີນດິນເຜົາ



ຫີນແຮ່



ດ້ານໃນຂອງແຜ່ນເຮັດຄວາມຮ້ອນແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຫີນແຮ່ທຳມະຊາດເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຮ້ອນ.



ປຶ້ມຄູ່ມືການ